介護保険 貸与

たよレール シリーズ

Free

たよレールフリー

水まわり兼用タイプ

2026年
10月～
新価格
本紙は改定後の価格を掲載しています




きれいに、


置ける手すり。

トイレなどで

立ち上がり補助に

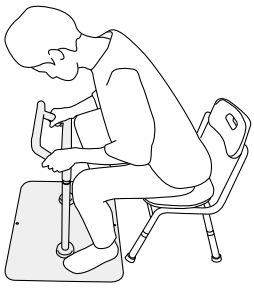

脱衣所などで立位保持に

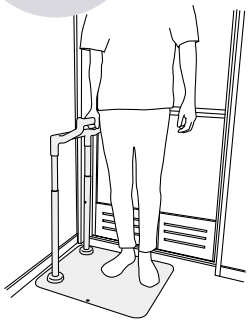









リラックススペースに置きたくなる
カラーとデザイン

落ちつきのある柔らかなベージュカラーは、
シンプルながら個性的な佇まい。
ほっと一息つきたい寝室やトイレなどのスペースにも
しっくりと馴染みます。




水まわりでも使える
安心の素材

手すり芯材や支柱にはステンレスを使用し、
ベースプレートはスチールに耐水性のある樹脂
を被覆しています。防カビ仕様で水や汚れにも
強く、お手入れしやすい素材です。
またグリップ部分は汗や水で濡れた手でも滑り
にくいよう、ウレタン樹脂を使用しています。





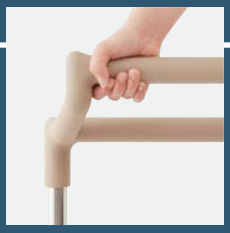

自由な使い方を生む
独自のカタチ

どこからでも握りやすい「ロ」の形をした手すり。
体の正面で手すりを握った際に手首の角度が自然になり、腕に力が入りやすい形状です。手すり上段の高さは最大827mmまで調整可能で、立ち座りの補助はもちろんのこと、立位の保持や歩行補助にもお使いいただけるため、利用シーンが広がります。

BZF-01 貸与※

水まわり兼用タイプ

※浴室で使用する場合は介護保険給付対象になりません。



手すりはこの位置でも使用できます。






※端の位置の場合は浴室での使用不可。

※手すりの位置を変えてもTAISコードは同一です。



耐水性で浴室にも設置できます。
※浴槽の中には設置できません。

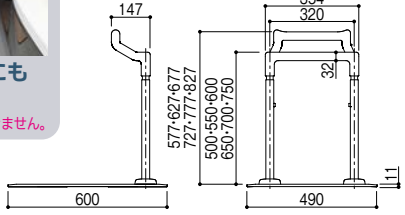

Webで詳細図面をご覧頂けます。

介護保険 貸与

- ■ベースプレートはスチールに耐水性のある樹脂を被覆しています。
- ■防カビ仕様で水や汚れにも強く、お手入れしやすい素材です。
- ■グリップ部分は汗や水で濡れた手でも滑りにくいよう、ウレタン樹脂を使用しています。

たよレールFree

040-4501　BZF-01

1台　129,000円（税抜き）

●材質：手すり/ステンレス（ウレタン樹脂被膜）・樹脂、ベースプレート/スチール（樹脂被覆）・合成ゴム、調整プレートF/合成ゴム、支柱/ステンレス、プレート裏フランジ/ステンレス、支柱カバー/軟質樹脂、ベースキャップ/樹脂●性能：防カビ仕様（ステンレス部を除く）●本体重量：約12.5kg●最大使用者体重：100kg
※スパナ（呼び13mm）と六角棒スパナ（呼び4mm）が別途必要です。

TAIS　01265-000289

スマホデモ機 WebAR対象商品

立ち上がり動作のポイントは 重心の移動と目線。
たよレールFreeがお手伝いします！



立ち上がり動作では、体の重心が2段階に移動しています。



座った姿勢（端坐位・椅坐位）では、体の重心が座面の上にあります。
そこから立ち上がるときに重心は斜め上へ移動しますが、
そのまま真っすぐ斜め上に向かうわけではありません。

通常、体を前に傾けて椅子からお尻を離そうとしたとき（第１相）に重心が前下方に移動し、
お尻が離れて関節を伸ばすまで（第２～３相）に上方へ移動する、
2段階の重心移動が行われています。




第1相
座位姿勢～臀部離床

第2相
臀部離床～足関節最大背屈位

第3相
足関節最大背屈位～股関節伸展終了

目印マーカー をうまく利用して、
立ち上がり動作をスムーズに！

たよレールFreeのベースプレート中心についている茶色のベースキャップは、
立ち上がり時の重心移動をスムーズに行うための目印マーカーです。
この目印を見ることを意識してみてください。
自然な動作で立ち上がることができます。

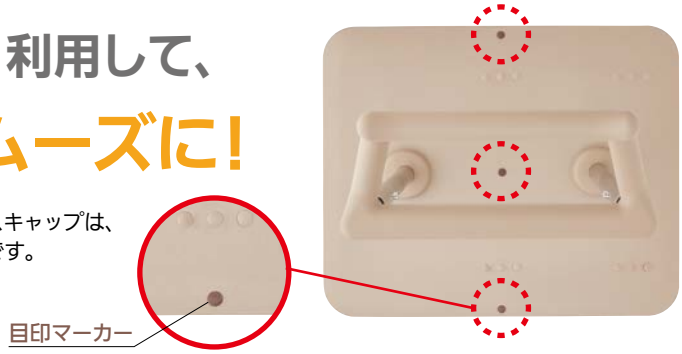




たよレールFreeを使った 立ち上がり動作のポイント

❶「足で体重を支える位置」と「上半身の重心」と「下半身の重心」が縦１列で並ぶように意識。
❷膝よりも顔を前に出す。
❸目印マーカーをのぞき込み、手すりに鉛直方向の力をかけて、体を押し上げます。


たよレールFreeを 体の正面に置いた時

手すりと手すりのすき間からベースプレート中心の目印マーカーをのぞき込むように体重を前方に持っていく事で、立ち上がり時の重心移動がスムーズに行えます。

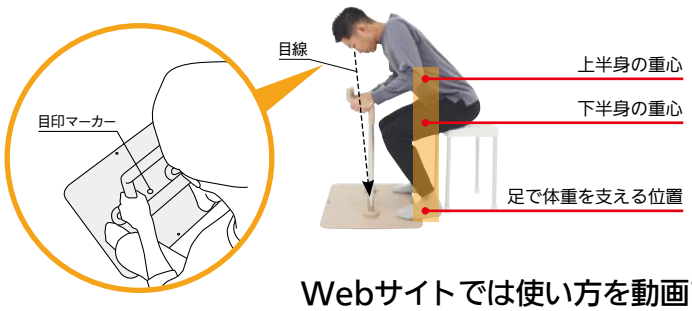

たよレールFreeを 体の横に置いた時

ベースプレート先端の目印マーカーをのぞき込むように体重を前方に持っていく事で、立ち上がり時の重心移動がスムーズに行えます。

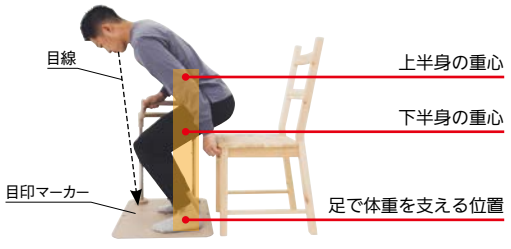

Webサイトでは使い方を動画でご説明してます！

製品動画を
ご覧いただけます。
福祉用具貸与
B-QR08-1

たよレールFree 関連商品

たよレールアームF

■たよレールFreeをベッドサイドで使用する際に取付けることで安定感が増します。

仕様変更
ノブボルト
形状変更



2個
1セット



（単位：mm）


たよレールアームF

040-4521　BZFO-01

1セット　**13,750円**（税抜き）

●材質：アルミ合金、半硬質樹脂、樹脂

TAIS　01265-000292

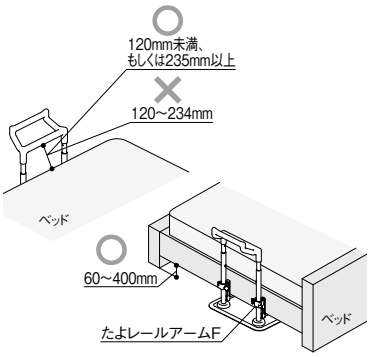




⚠ 使用上のご注意

●浴室内で使用する場合は、ベースプレート端部に手すりを取付けて設置しないでください。また、浴槽縁のまたぎ越し動作では使用しないでください。製品が不安定になり転倒する恐れがあります。

●浴槽の中には設置できません。

※浴室で使用する場合は介護保険給付対象になりません。

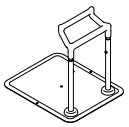



浴室では
手すりを端部に
取付けない




浴槽縁の
またぎ越しには
使用しない

●下図のように手すりをベースプレート端部に外向きで取付ける場合は、必ず「たよレールアームF」を使用し、ベッドフレームに密着させてください。

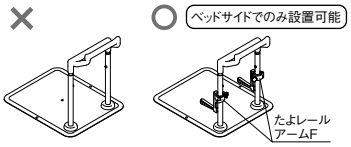

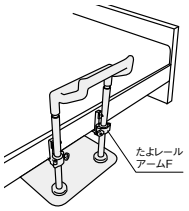

●手すりをベースプレート中央に取付ける場合や、ベースプレート端部に内向きで取付ける場合は、ベッドフレームから離して右図のように使用できます。

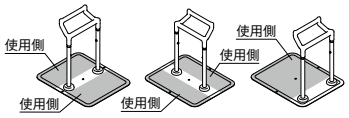



●たよレールFree及びたよレールFree用オプションは、絶対に指定製品以外や、電動ベッドのサイドバー・介助バーまたは、他社製品と組合せて使用しないでください。

●床面の不陸が大きく、ベースプレートが安定しない場所には設置しないでください。

●設置する床材の取扱説明書、注意事項をよく確認してください。（ゴムの接触による変色に注意喚起されている床材の場合は、当商品の設置により変色する恐れがあります。）

●屋外には設置しないでください。

●定期点検（モニタリング時）を行い、ガタツキ、ねじの緩みや締め忘れ、破損、その他異常がないか確認してください。

●ご利用になる前に付属されている「取扱説明書」を必ずお読みになり、記載されている内容をお守りください。

たよレールガードF

■手すりのすき間に手や頭が入り込むのを防ぎます。

■浴室内でも使用できます。

※浴室でたよレールFreeを使用する場合は介護保険給付対象になりません。





たよレールガードF

040-4522　BZFO-02

1枚　**6,500円**（税抜き）

●材質：生地/ナイロン・ポリプロピレン、面ファスナー/ナイロン

●サイズ：200×190mm（折りたたみ時）

TAIS　01265-000290

ベースマットF


■ベースプレート表面の滑りや冷たさを緩和します。

※浴室では使用できません。

屋内専用



裏面
ズレ防止の
マイクロ吸盤加工
（アクリル系吸着材）

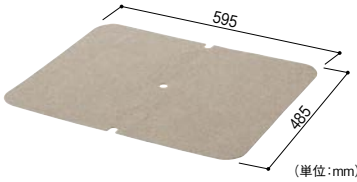

（単位：mm）

ベースマットF

040-4524　BZFO-04

1枚　**3,300円**（税抜き）

●材質：マット/ポリエステル、吸着面/アクリル系吸着材

TAIS　01265-000295

調整プレートF

■たよレールFreeのベースプレートのガタツキを抑えるプレートです。

1セット
6枚入



※本体には1セット（6枚）が付属しております。

※追加で必要な場合にご購入ください。

調整プレートF

040-4523　BZFO-03

1セット（6枚入）　**2,800円**（税抜き）

●材質：合成ゴム

マツ六は製品安全の向上に取組んでいます。

PSアワード2024において
3度目の経済産業大臣賞を受賞し、
「製品安全対策ゴールド企業」に
認定されました。

弊社の安全・安心への取り組みは
Webサイトにてご覧いただけます。
https://www.mazroc.co.jp/safety/

Product Safety
製品安全対策優良企業
経 済 産 業 省

代理店

マツ六株式会社
〒543-0051　大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL 06-6774-2255　FAX 06-6774-2248
https://www.mazroc.co.jp/

26.10（M）000