
介護保険 貸与

たよレール シリーズ

Free

たよレールフリー

室内タイプ

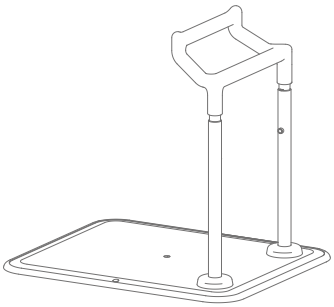


2026年
10月～
新価格
本紙は改定後の価格を掲載しています



心地よく、

置ける手すり。



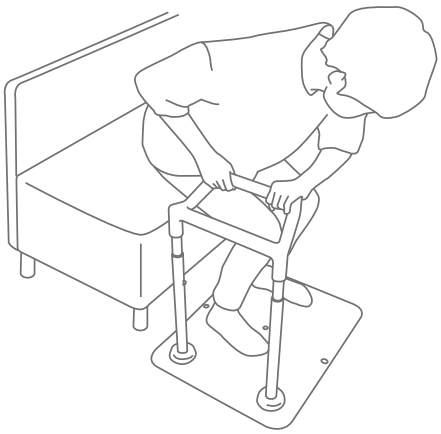




毎日の暮らしに寄り添う
優しい素材

ベースプレートにはカーペットのような
肌触りの専用ベースマットを標準で付属。
素足でも冷たさを感じにくく、
スリッパや靴下でも滑りにくい仕様です。
またグリップ部分は、握る力を入れやすいよう
柔らかさのあるウレタン樹脂を使用しています。



となりに置きたくなる
カラーとデザイン

落ちつきのある柔らかなベージュカラーは、
シンプルながら個性的な佇まい。
寝室やリビング、玄関など
どのお部屋に置いていただいても、インテリアに馴染みます。

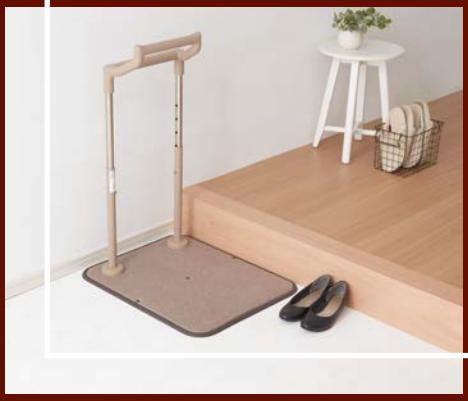








自由な使い方を生む
独自のカタチ


どこからでも握りやすい「ロ」の形をした手すり。
体の正面で手すりを握った際に手首の角度が自然になり、腕に力が入りやすい形状です。手すり上段の高さは最大827mmまで調整可能で、立ち座りの補助はもちろんのこと、立位の保持や歩行補助にもお使いいただけるため、利用シーンが広がります。

ベッドサイドで

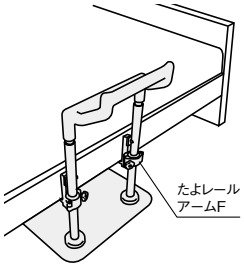



ソファーや椅子の横に

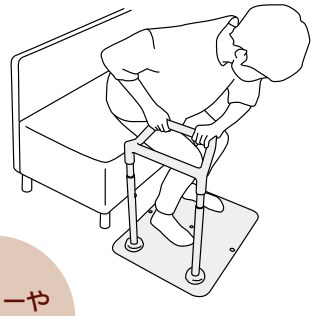

製品動画を
ご覧いただけます。
福祉用具貸与
B-QR08-1

玄関や廊下で



立ち上がり動作では、体の重心が2段階に移動しています。




座った姿勢（端坐位・椅坐位）では、体の重心が座面の上にあります。
そこから立ち上がるときに重心は斜め上へ移動しますが、
そのまま真っすぐ斜め上に向かうわけではありません。

通常、体を前に傾けて椅子からお尻を離そうとしたとき（第１相）に重心が前下方に移動し、
お尻が離れて関節を伸ばすまで（第２～３相）に上方へ移動する、
2段階の重心移動が行われています。



第1相	第2相	第3相
座位姿勢～臀部離床	臀部離床～足関節最大背屈位	足関節最大背屈位～股関節伸展終了

目印マーカー をうまく利用して、
立ち上がり動作をスムーズに！

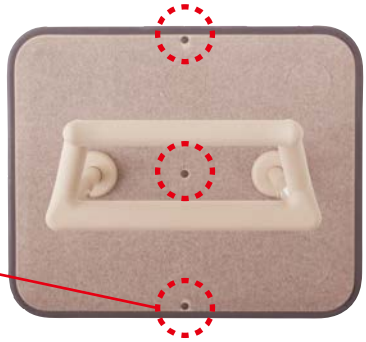

たよレールFreeのベースプレート中心についている茶色のベースキャップは、
上図の「第２相」で重心移動をスムーズに行うための目印マーカーです。
この目印を見ることを意識してみてください。
自然な動作で立ち上がることができます。





たよレールFreeを使った 立ち上がり動作のポイント

❶「足で体重を支える位置」と「上半身の重心」と「下半身の重心」が縦１列で並ぶように意識。
❷膝よりも顔を前に出す。
❸目印マーカーをのぞき込み、手すりに鉛直方向の力をかけて、体を押し上げます。

たよレールFreeを 体の正面に置いた時


手すりと手すりのすき間からベースプレート中心の目印マーカーをのぞき込むように体重を前方に持っていく事で、立ち上がり時の重心移動がスムーズに行えます。

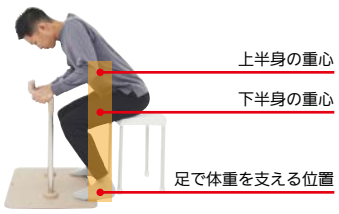


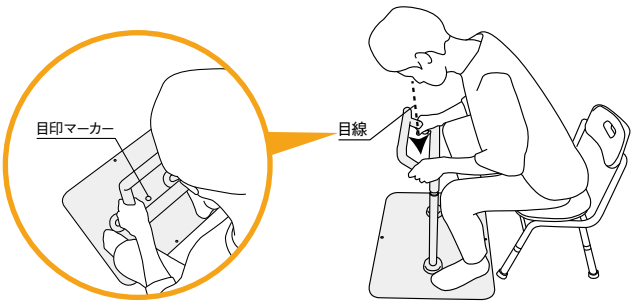

たよレールFreeを 体の横に置いた時

ベースプレート先端の目印マーカーをのぞき込むように体重を前方に持っていく事で、立ち上がり時の重心移動がスムーズに行えます。

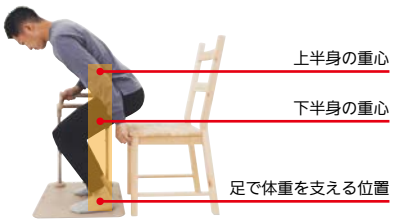

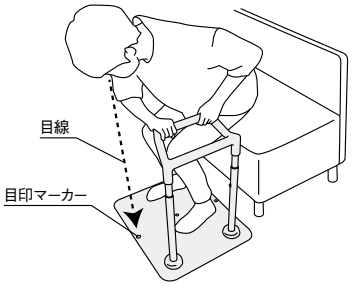

たよレールFree

Webで詳細図面をご覧頂けます。 介護保険 貸与





カーペットの
ような肌触りの
専用ベースマットが
ついています。

ベースプレートの縁ゴム
には傾斜をつけて、
つまづきにくく。

**手すりは
この位置でも
使用できます。**

※手すりの位置を変えても
TAISコードは同一です。

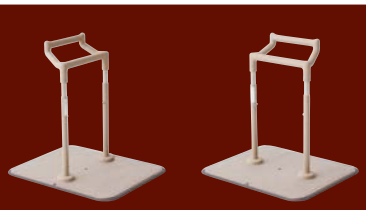

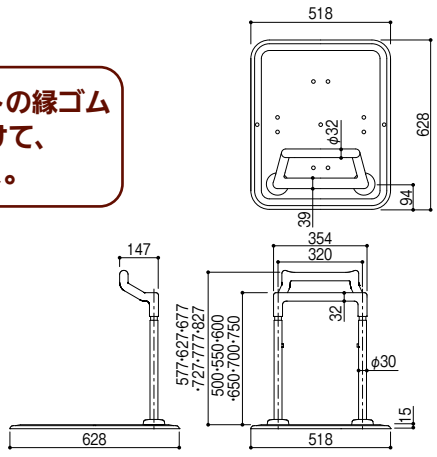

（単位：mm）

たよレールFree 貸与

040-4502 BZF-02

1台 **93,000円**（税抜き）

●材質：手すり/ステンレス（ウレタン樹脂被膜）・樹脂、ベースプレート/スチール・軟質樹脂、支柱/スチール、プレート裏フランジ/スチール、支柱カバー/軟質樹脂、ベースキャップ（目印マーカー）/樹脂、ベースマットF/ポリエステル（アクリル系吸着材）●性能：防カビ仕様（ベースマットを除く樹脂部のみ）●本体重量：約14.0kg●最大使用者体重：100kg
※スパナ（呼び13mm）と六角棒スパナ（呼び4mm）が別途必要です。

TAIS　01265-000302

たよレールFree 関連商品

■たよレールFreeをベッドサイドで使用する際に取付けることで安定感が増します。

仕様変更
ノブボルト
形状変更



2個
1セット



（単位：mm）

たよレールアームF

040-4521 BZFO-01

1セット **13,750円**（税抜き）

●材質：アルミ合金、半硬質樹脂、樹脂

TAIS　01265-000292

■手すりのすき間に手や頭が入り込むのを防ぎます。





たよレールガードF

040-4522 BZFO-02


1枚 **6,500円**（税抜き）


●材質：生地/ナイロン・ポリプロピレン、面ファスナー/ナイロン
●サイズ：200×190mm（折りたたみ時）

TAIS　01265-000290


⚠ 使用上のご注意

●下図のように手すりをベースプレート端部に外向きで取付ける場合は、必ず「たよレールアームF」を使用し、ベッドフレームに密着させてください。

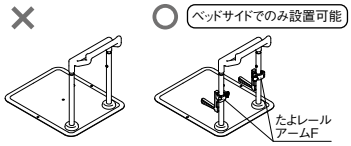

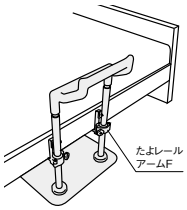

●手すりをベースプレート中央に取付ける場合や、ベースプレート端部に内向きで取付ける場合は、ベッドフレームから離して右図のように使用できます。

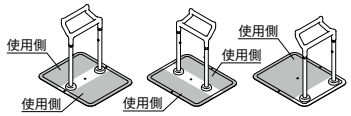



●たよレールFree及びたよレールFree用オプションは、絶対に指定製品以外や、電動ベッドのサイドバー・介助バーまたは、他社製品と組合せて使用しないでください。
●床面の不陸が大きく、ベースプレートが安定しない場所には設置しないでください。
●屋外・浴室には設置しないでください。
●定期点検（モニタリング時）を行い、ガタツキ、ねじの緩みや締め忘れ、破損、その他異常がないか確認してください。
●ご利用になる前に付属されている「取扱説明書」を必ずお読みになり、記載されている内容をお守りください。

マツ六は製品安全の向上に取組んでいます。

PSアワード2024において
3度目の経済産業大臣賞を受賞し、
「製品安全対策ゴールド企業」に
認定されました。

弊社の安全・安心への取り組みは
Webサイトにてご覧いただけます。
https://www.mazroc.co.jp/safety/

Product Safety
製品安全対策優良企業
経 済 産 業 省

代理店

マツ六株式会社
〒543-0051　大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL 06-6774-2255　FAX 06-6774-2248
https://www.mazroc.co.jp/

26.10（M）000