介護保険 貸与

LOHATES

据置式手すり　ロハテス

KENTEN AWARD 優良製品・技術表彰 2022

経済産業省
製造産業局長賞



あんしんと、
その先にあるここちよさ。

Osaka products

LOHATESは「スマホでデモ機」でバーチャル設置をお試しいただけます。

スマホでデモ機 WebAR 対象商品


2026年
10月～
新価格
本紙は改定後の価格を掲載しています

LOHATES（ロハテス）の特長

■本体重量は約1.8kg と軽量。使いたいところまで簡単に持ち運べます。
■グリップ部は肌触りの優しい天然木を使用しています。



LOHATES（ロハテス）
ホワイト　貸与
019-1550　LH-03WT-R
1台 21,500円（税抜き）
TAIS　01265-000269

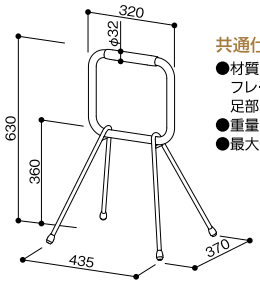

（単位:mm）

共通仕様
●材質：手すり/天然木、フレーム/スチール、足部/EPDM
●重量：約1.8kg
●最大使用者体重：100kg



LOHATES（ロハテス）
ブラック　貸与
019-1551　LH-03BK-R
1台 21,500円（税抜き）
TAIS　01265-000270

OPTIONS（オプション）






ブラウン


グレー

LOHATES用トレー

商品コード	品番	色	価格
019-1504	LH-01T-BN	ブラウン	1個 4,400円（税抜き）
019-1505	LH-01T-GY	グレー	

●材質：ナイロン●耐荷重：3kg


ブラウン


グレー

LOHATES用マガジンラック

商品コード	品番	色	価格
019-1506	LH-01M-BN	ブラウン	1個 4,400円（税抜き）
019-1507	LH-01M-GY	グレー	

●材質：綿●耐荷重：3kg


HOW TO USE（使い方）

椅子からの立ち上がり


1 手すりの位置がひざ頭の少し前になるようにLOHATESを置いてください。



胴体の真横に置くと立ち上がりにくいので注意してください。

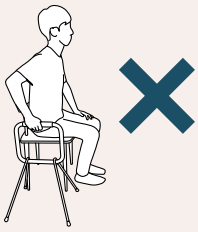


2

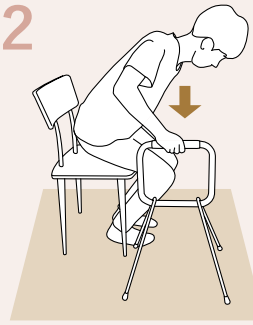

足を後方に引き、前傾姿勢となった状態でLOHATESを下に押しながら立ち上がります。

床からの立ち上がり

1

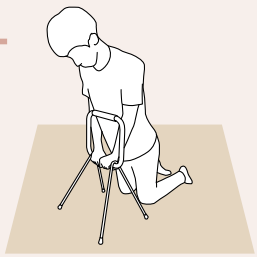

正面にLOHATESを置いて、1段目をつかみながら立ち上がりの姿勢を整えてください。


2



2段目をつかみ、前傾姿勢の状態で、LOHATESを下に押しながら立ち上がります。

⚠ ご注意

●ご使用の際は、水平方向に力をかけないでください。
軽量のため、誤った使い方をするとLOHATES自体が倒れてしまい、軽傷または物的損害の可能性があります。

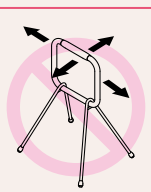

お問合せ

マリ六株式会社
〒543-0051　大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
https://www.mazroc.co.jp/

26.10（M）000